

REKTOSKOP FIRMY OPTEC

Rektoskop produkowany w firmie OPTEC został zaprojektowany do współpracy zarówno ze sterylnymi tubusami jednorazowymi jak też wykonanymi ze stali chirurgicznej tubusami stalowymi do wielokrotnej sterylizacji. Stosowanie tubusa jednorazowego zapewnia najwyższą możliwą "czystość" badania, podczas gdy korzystanie z wysterylizowanego tubusa stalowego znacznie obniża koszt zabiegu, szczególnie w przypadku dużej ilości wykonywanych rektoskopii. Modułowość konstrukcji rektoskopu umożliwia zamienne stosowanie obu typów końcówek.

Tubusy rektoskopu mocowane są do głowicy z pierścieniowym oświetleniem światłowodowym. Światło doprowadzone jest autoklawowalnym światłowodem z dwukanałowego źródła światła zimnego. Taka konstrukcja poprawia znacznie równomierność oświetlenia w porównaniu z urządzeniami, gdzie zastosowano system oświetlenia punktowego. Odłączalność tubusów pozwala na łatwe oczyszczenie powierzchni światłowodów w głowicy w razie ich zabrudzenia w trakcie badania.

W zestawie rektoskopu przewidziano tubusy stalowe dla proktoskopii i rektoskopii.

Oferujemy również adapter do sterylnego anoskopu operacyjnego.

W produkowanych przez OPTEC autoklawowalnych światłowodach medycznych możliwe jest stosowanie końcówek do dowolnego źródła światła oraz końcówek pozwalających na podłączenie wzierników innych producentów.

**Rektoskop firmy OPTEC jest nowoczesnym
przyrządem diagnostycznym.**

Zakład Doświadczalno Produkcyjny Optoelektroniki **OPTEC**
15-208 Białystok ul. Wołyńska 14
tel. ++ 48-85 743 74 17
fax ++ 48-85 743 78 90

email: info@optec.pl
www.optec.pl



PRECYZJA
JAKOŚĆ
CENA



REKTOSKOP

FUNKCJONALNOŚĆ

Prosty w obsłudze



- ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Z KANAŁEM AWARYJNYM
– MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI ZABIEGU W RAZIE PRZEPALENIA SIĘ ŻARÓWKI
- ŻARÓWKI HALOGENOWE O NAJDŁUŻSZYM NA RYNKU CZASIE PRACY
- KORZYSTNA CENA ŻARÓWKI
– NIEWYSOKI KOSZT EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

- MOŻLIWOŚĆ ZAMIENNEGO STOSOWANIA TUBUSÓW STAŁOWYCH WIELORAZOWEGO UŻYTKU LUB JEDNORAZOWYCH, STERYLNYCH





- OKULAR Z OPTYKĄ POWIĘKSZAJĄCĄ POPRAWIAJĄCY KOMFORT OBSERWACJI
- ODŁĄCZALNA GŁOWICA Z PIERŚCIENIOWYM OŚWIECENIEM ŚWIATŁOWODOWYM
- DOSKONAŁE OŚWIECENIE MIEJSC OBSERWOWANYCH, ŁATWE OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI ŚWIATŁOWODU



- BOGATE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
 - SZCZYPCE BIOPSYJNE
 - WATOTRZYMACZ
 - SSAK
 - KOMPLET TUBUSÓW PEDIATRYCZNYCH
 - ANOSKOP OPERACYJNY DO ZABIEGÓW USUWANIA HEMOROIDÓW



- RĘKOJEŚĆ POPRAWIAJĄCA WYGODĘ UŻYTKOWANIA
- ODŁĄCZALNY ŚWIATŁOWÓD – MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁRACY ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA DOWOLNEGO PRODUCENTA PRZY WYKORZYSTANIU ADAPTERÓW
- MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI ŚWIATŁOWODU W AUTOKLAWIE

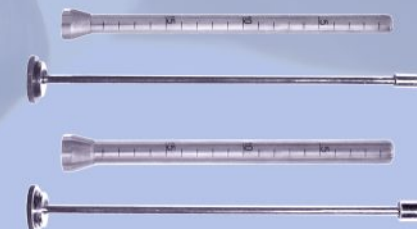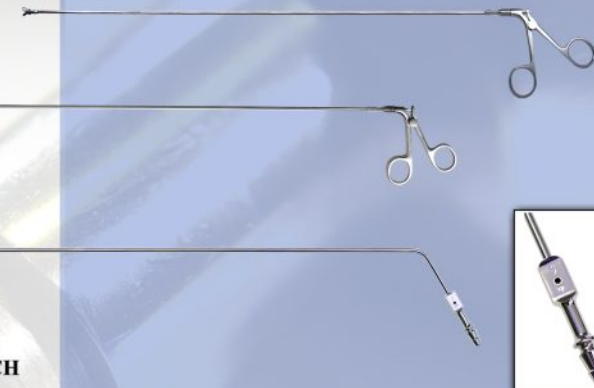

- NAJLEPSZE MATERIAŁY UŻYTE DO PRODUKCJI
- ŚWIATŁOWÓD O BARDZO WYSOKIEJ TRANSMISJI ŚWIATŁA I DUŻEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
- KONSTRUKCJA SPRAWDZONA W DŁUGIM OKRESIE ISTNIENIA NA RYNKU
- DWULETANIA GWARANCJA

OPTIC